

ESTHET-X[®] HD

HIGH DEFINITION MICRO MATRIX RESTORATIVE

ИСКУССТВО ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ



НОВОЕ точное распределение частиц наполнителя
обеспечит вам оптимальные клинические результаты

Для лучшей стоматологии

DENTSPLY

Esthet•X® HD

High Definition Micro Matrix Restorative

Пионер в нанотехнологиях, DENTSPLY с удовольствием представляет материал, в котором наполненность была модифицирована для достижения идеальной комбинации красоты и прочности... и новой **ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ**.

С заново оптимизированным распределением частиц наполнителя Esthet•X®HD обеспечивает:

- быструю, простоту в достижении зеркального и долговременного блеска
- выдающиеся физические свойства для полостей всех классов
- идеальные рабочие характеристики
- широкий диапазон оттенков и упаковки


Быстрота, блеск и устойчивая полируемость

Как результат новой технологии наполнения, охватывающей частицы нанонаполнителя, размер частиц и их точное контролируемое распределение для получения окончательной композитной реставрации высокой четкости, вы получаете:

- легкую полируемость и быстроту в достижении окончательного блеска
- полируемость для надежного долговременного результата


Блеск через 15 секунд полировки¹

Оттенок А2

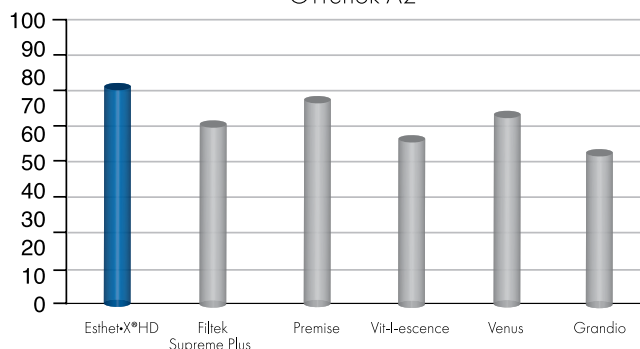

Esthet•X®HD в сравнении с Esthet•X®

Анализ размера частиц¹

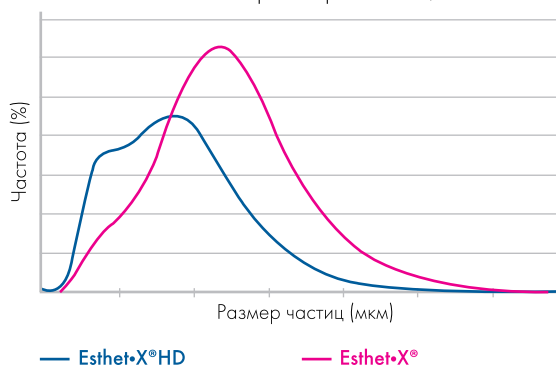

Новая технология оптимизации наполнителя устраняет повторяемость крупных частиц. Результат — распределение частиц требуемого размера, что обеспечивает быструю полируемость и выдающиеся физические свойства

Клиническая эффективность для полостей ВСЕХ классов

Сохраняя стабильность и успех ряда поколений известных реставрационных композитов DENTSPLY, Esthet•X®HD предлагает исключительную эффективность реставрационного процесса и идеален для полостей всех классов. Esthet•X®HD обеспечивает совершенное сочетание прочности, рабочих характеристик и консистенции с получением красивого естественного результата



До


После

- Высокая устойчивость к сколам
- Стираемость, как у эмали естественного зуба
- Хорошая рентгеноконтрастность для простоты диагностики

Идеальные рабочие характеристики и выбор оттенков для следования Вашей технике

Вне зависимости от используемой вами техники — будь то послойная техника с несколькими оттенками и опаковостями или техника одного оттенка — технология наполненности высокой точности, реализованная в Esthet•X®HD, обеспечивает идеальную комбинацию рабочих и оптических свойств для замещения естественных структур зуба.


- полный ряд оттенков и опаковостей с высокой точностью наполненности для любой прямой реставрации
- все оттенки и опаковости имеют высокую прочность и превосходную полируемость
- оптимальная скульптурная рабочая консистенция для сохранения формы реставрации при моделировании
- удобная консистенция для реставраций передних и боковых зубов, отсутствие прилипания к инструментам

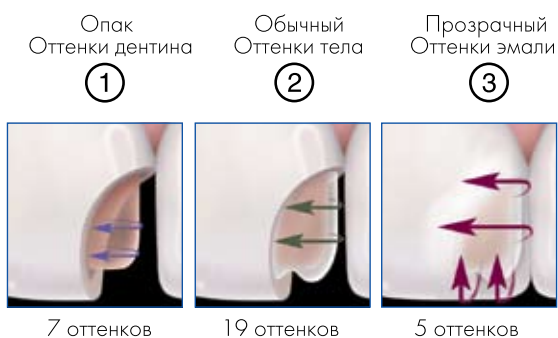

Три разные опаковости дают Вам возможность выполнять реставрации снизу вверх с повторением структур естественного зуба.

Визуализация результатов в 3D измерении со шкалой оттенков Esthet•X® TruMatch®

«Начните думать с конца». Со шкалой оттенков TruMatch® Вы можете увидеть конечную реставрацию до начала внесения композита. Рецепт на каждом эталоне шкалы позволяет сделать необходимый для реставрации выбор и сразу начать работу.

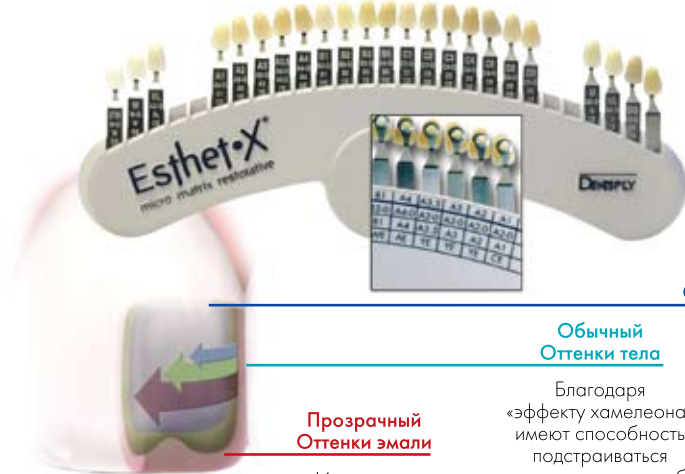

Прозрачный Оттенки эмали

Имитируют прозрачность и живость естественной эмали

CE/бесцветная эмаль
WE/белая эмаль
YE/желтая эмаль
AE/янтарная эмаль
GE/серая эмаль

Обычный Оттенки тела

Благодаря «эффекту хамелеона» имеют способность подстраиваться под окружающие зубы

W/белый XL/экстра светлый
A1
A2
A3
A3,5
A4
B1
B2
B3

B5/темно-желтый
C1
C2
C3
C4
C5/экстра серо-коричневый
D2
D3


Опакый Оттенки дентина

Создают основу оптимальной опаковости

W-0
A2-0
A4-0
B2-0
C1-0
C4-0
D3-0




Высокая сопротивляемость к образованию трещин для прочности и износоустойчивости

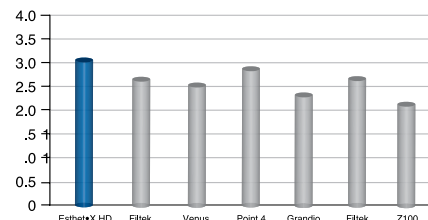


Сопротивляемость развитию трещин нужна в зонах, где слой композита тонкий, например, в области краев реставрации или там, где он подвержен интенсивным нагрузкам, подобно полостям класса IV

Гладкость поверхности для устойчивой красоты

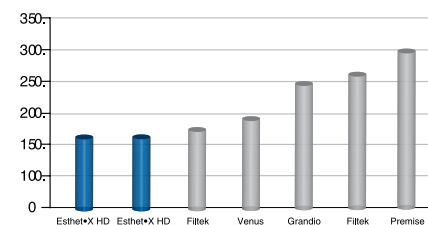

Исследование шероховатости поверхности оценивает окончательную гладкость поверхности композита после финишной обработки и полировки. Гладкие реставрации выглядят более эстетичными и более просты в уходе, чем реставрации с шероховатой поверхностью. Также гладкая поверхность снижает задержку налета, минимизирует пигментацию и вторичный кариозный процесс

Высокая устойчивость к стираемости

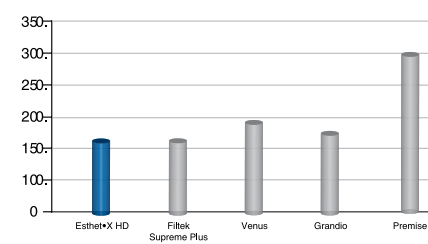

Исследование стираемости показывает способность композитов к долговременной устойчивости к износу под жевательной нагрузкой. Реставрационный материал Esthet•X®HD имеет высокую устойчивость к стираемости для долговременных реставраций

Вне зависимости от того, нужен вам для работы один оттенок или слои разной опаковости, микроматричный реставрационный композит Esthet•X®HD обеспечит простоту для создания лучшей реставрации. В итоге вы получаете композит, который имеет выдающиеся физические свойства, устойчивую полируемость и оптимальные рабочие характеристики

Система доставки в капсулах

630600 ПОЛНЫЙ НАБОР

156 капсул (каждая по 0,25 г)
по 10 оттенков: A1, A2, A3, A3,5, A2-0
по 5 оттенков: W, X1, B1, B2, B3, C1, C2,
C3, C5, D2, U, CE, WE, YE
по 3 оттенка: A4, B5, C4, D3, AE, GE, W-0,
A4-0, B2-0, C1-0, C4-0, D3-0

10 юни-доз адгезива Prime & Bond[®] NT
1 шкала Esthet-X[®] HD Tru Match[®]
с эталонами отбеленных зубов
1 шприц Esthet-X[®] flow —оттенок A2
Шлифовочные формы Enhance[®] —
10 дисков, 5 полых конусов, 5 конусов
Полировочные формы PoGo[®] —
10 дисков, 5 полых конусов, 5 конусов
1 шприц кондиционирующего
геля для зубов Caulk[®] 34%
1 пистолет-аппликатор для капсул
Система матриц Palodent[®]
Аксессуары

630601 СТАРТОВЫЙ НАБОР

60 капсул (каждая по 0,25 г)
по 10 оттенков: A1, A2, A3, A3,5, A2-0
по 5 капсул: CE, YE

10 юни-доз адгезива Prime & Bond[®] NT
1 шкала Esthet-X[®] HD Tru Match[®]
с эталонами отбеленных зубов
1 шприц Esthet-X[®] flow —оттенок A2
Шлифовочные формы Enhance[®]
Полировочные формы PoGo[®]
1 шприц кондиционирующего
геля для зубов Caulk[®] 34%
1 пистолет-аппликатор для капсул
Аксессуары

630604 РАБОЧИЙ НАБОР

20 капсул (каждая по 0,25 г)
по 5 капсул: A1, A2, A2-0, YE
Шлифовочные формы Enhance[®]
Полировочные формы PoGo[®]
Esthet-X[®] HD таблица эталона A2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПАКОВКИ

Обычные оттенки тела

630615 белый W
630617 A1
630618 A2
630619 A3
630620 A3,5
630622 B1
630623 B2
630627 C2
630633 Универсальный U

Прозрачные оттенки эмали
630610 бесцветная эмаль — CE
630611 белая эмаль — WE
630612 желтая эмаль — YE
630613 янтарная эмаль — AE
630614 серая эмаль — GE

Обычные оттенки тела

630616 XL
630621 A4
630624 B3
630625 B5 —темно-желтый
630626 C1
630628 C3
630629 C4
630630 C5 — экстра серо-коричневый
630631 D2
630632 D3

Опакующие оттенки дентина

630634 белый opak W-0
630635 A2-0
630636 A4-0
630637 B2-0
630638 C1-0
630639 C4-0
630640 D3-0

Дентсплай Россия Лимитед
ул. Малая Никитская, д. 27, стр. 2
Москва, 121069

Система доставки в шприцах Easy•Twist

630711 ПОЛНЫЙ НАБОР

31 шприц (каждый по 3 г)
1 каждого оттенка: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2,
B3, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D2,
D3, U, YE, AE, GE, CE, WE, W,
X1, W-0, A2-0, A4-0, B2-0,
C1-0, C4-0, D3-0

630714 СТАРТОВЫЙ НАБОР

5 шприцев (каждый по 3 г)
1 каждого оттенка: A2, A3, A3,5, YE, A2-0
Адгезив Prime&Bond NT (4,5 мл.)
Prime & Bond[®] NT аксессуары
1 шприц кондиционирующего
геля для зубов Caulk[®] 34%
Шлифовочные формы Enhance[®]
Система матриц Palodent[®]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПАКОВКИ

Обычные оттенки тела

630655 белый W
630656 XL
630657 A1
630658 A2
630659 A3
630660 A3,5
630661 A4
630662 B1
630663 B2
630664 B3
630665 B5 — темно-желтый
630666 C1
630667 C2
630668 C3
630669 C4
630670 C5 — экстра серо-коричневый
630671 D2
630672 D3
630673 Универсальный U

Прозрачные оттенки эмали
630650 бесцветная эмаль — CE
630651 белая эмаль — WE
630652 желтая эмаль — YE
630653 янтарная эмаль — AE
630654 серая эмаль — GE

Опакующие оттенки дентина

630674 белый opak W-0
630675 A2-0
630676 A4-0
630677 B2-0
630678 C1-0
630679 C4-0
630680 D3-0
630603 шкала оттенков
Esthet-X[®] HD Tru Match[®]

Финишная отделка и полировка

624075 ENHANCE[®] ПОЛНЫЙ НАБОР

20 шлифовочных дисков
10 шлифовочных конусов
10 шлифовочных полых конусов
25 полировочных губок
Полировочная паста Prisma[®]-Gloss™ (4 г)
Полировочная паста Prisma[®]-Gloss™ (4 г)
Металлический мандрель

ENHANCE[®] ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПАКОВКИ

624045 40 шлифовочных дисков
624055 40 шлифовочных полых конусов
624065 40 шлифовочных конусов
624020 100 полировочных губок и металлический
мандрель

624075 ENHANCE[®] и POGO[®] ПОЛНЫЙ НАБОР

10 Enhance[®] шлифовочных дисков
10 Enhance[®] шлифовочных конусов
10 Enhance[®] шлифовочных полых конусов
10 PoGo[®] алмазных полирующих дисков
10 PoGo[®] алмазных полирующих полых конусов
10 PoGo[®] алмазных полирующих конусов

POGO[®] ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПАКОВКИ

662010 40 алмазных полировочных дисков
662023 40 алмазных полировочных полых конусов
662022 40 алмазных полирующих конусов


PRISMA[®]-GLOSS™ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПАКОВКИ

631400 Fine — 1 шприц (4 г)
631450 Extra-fine — 1 шприц (4 г)

Enhance[®]

Система финишной отделки

Диски, полые конусы и конусы системы финишной отделки Enhance[®] исключают многоэтапность. Этими формами одной абразивности вы можете придавать контур, шлифовать и готовить к полировке

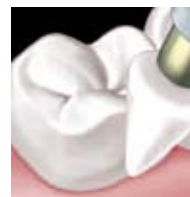

PoGo[®]

Обозначенный алмазный микрополирующий инструмент



фото Др. Джефа Бланка

В то время как другие системы требуют нескольких этапов и минут для полировки, алмазные микрополирующие диски, полые конусы или конусы PoGo[®] обеспечат полировку за минуту в один простой этап! С формами PoGo[®] вы получите превосходный окончательный блеск и больше времени для восхищения выполненной работой

Полирующие головки PoGo[®] создают яркий блеск в кратчайшее время с минимумом шагов!



Для лучшей стоматологии

DENTSPLY

Тел.: (495) 988 2808
Факс: (495) 988 2809
www.dentsplycis.com